

Prospecto del Kit de Uso Personal


Lea atentamente las instrucciones del prospecto antes de tomar la muestra.
Los resultados pueden carecer de validez si el examen no se realiza correctamente.

Toma de la muestra


- 1. Coloque el papel de recolección dentro de la taza, sobre el agua.
- 2. Deposite la muestra de excrementos sobre el papel de recolección.
- 3. Obtenga una muestra de excremento antes de que el papel con los excrementos se sumerja en el agua.
- 4. Descargue la cisterna. El papel de recolección es biodegradable y no daña los sistemas sépticos.

Recolección de la muestra


1. Rotule el recipiente para muestras con nombre, fecha de nacimiento y fecha de recolección.

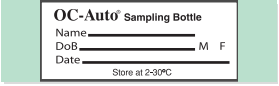

2. Tuerza y hale la tapa verde para abrirla.

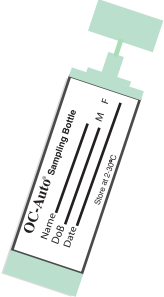

3. Raspe la superficie de la muestra de excrementos con la sonda para muestras.

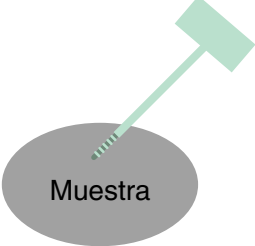


4. Cubra completamente la porción de la sonda con la muestra de excremento.




5. Para cerrar la botella para muestras, introduzca la sonda y cierre la tapa verde con firmeza. No reabra la botella.




6. Envuelva la botella para muestras con protector absorbente e introdúzcala en la bolsa de plástico. Lea las Instrucciones de envío, a continuación.

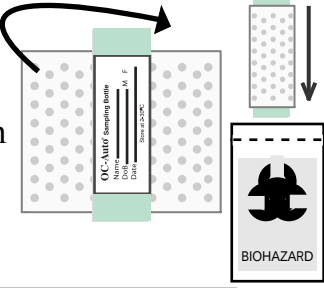

- Instrucciones de envío
1. Registre la fecha de recolección en la orden del análisis e introduzca la orden en el sobre de envío por correo, junto con la bolsa de plástico con el recipiente con la muestra y la compresa de absorción.

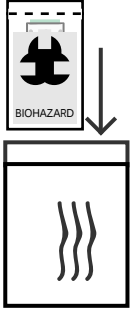


2. Quite la cinta de la solapa.

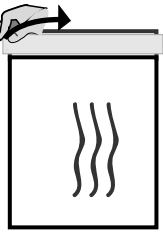


3. Pliegue la solapa por la línea de doblez.

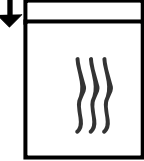


4. Presione con firmeza para sellar el sobre. Entregue de inmediato (en el plazo de 24 horas de la recolección) al servicio postal de los EE.UU. para su entrega directamente al laboratorio.

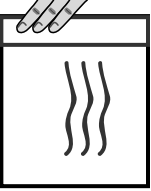

- Package Insert for Personal Use Kit
- Read all package insert directions carefully before sample collection.
Test results may be invalid if test is not performed properly.
- Sample Deposit
- 1. Place supplied collection paper inside toilet bowl on top of water.
 - 2. Deposit stool sample on top of collection paper.
 - 3. Collect sample from stool before paper sinks and stool sample touches water.
 - 4. Flush. Collection paper is biodegradable and will not harm septic systems.
- Sample Collection
1. Label sampling bottle with name, date of birth, and collection date.

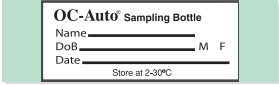


2. Open green cap by twisting and lifting.

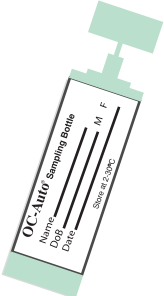

3. Scrape the surface of the fecal sample with the sample probe.

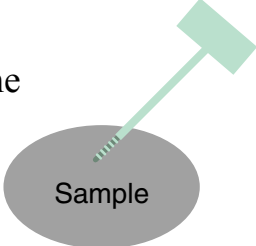


4. Cover the grooved portion of the sample probe completely with stool sample.

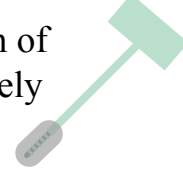

5. Close sampling bottle by inserting the sample probe and snap green cap on tightly. Do not reopen.




6. Wrap sampling bottle in absorbent pad and insert into plastic bag. Proceed to Mailing Instructions below.

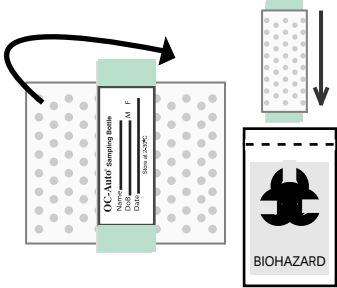


Mailing Instructions


1. Record stool collection date on the test requisition and insert into the mailing envelope, together with the plastic bag containing the sampling bottle and absorbent pad.

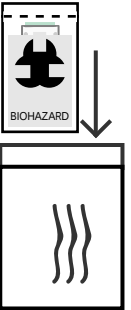


2. Peel tape from flap.

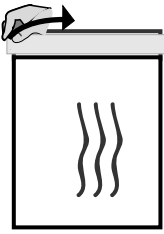

3. Fold flap at prefold line.

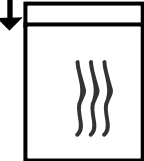

4. Press firmly to seal. Promptly (within 24 hours of collection) place in the US Mail for delivery directly to the laboratory.

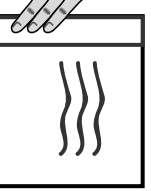

PN 80609-00