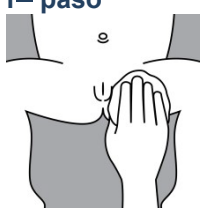

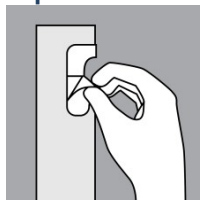
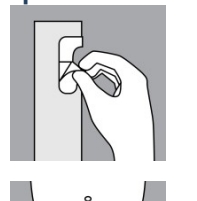
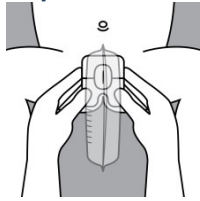
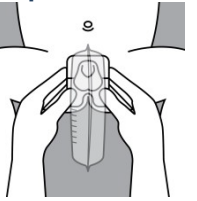
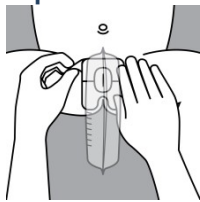
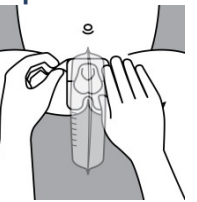


Cómo usar una bolsa de recolección de orina para pacientes pediátricos

Para las niñas	Para los niños
<p>1er paso</p>  <p>Limpie de adelante hacia atrás, limpiando entre cada pliegue de piel de los labios vaginales.</p> <p>Limpie alrededor del ano.</p> <p>Deje que el área se seque al aire.</p>	<p>1er paso</p>  <p>Comience limpiando el pene desde la punta hacia abajo (tire el prepucio hacia atrás si es necesario).</p> <p>Limpie el escroto. Limpie alrededor del ano. Deje que el área se seque al aire.</p>
<p>2º paso</p>  <p>Retire la parte posterior protectora de la mitad inferior del parche adhesivo que tiene la bolsa de orina.</p>	<p>2º paso</p>  <p>Retire la parte posterior protectora de la mitad inferior del parche adhesivo que tiene la bolsa de orina.</p> <p>Si su hijo es activo, puede ser más fácil dejar el adhesivo en su lugar hasta que haya colocado la abertura sobre su escroto y pene.</p>
<p>3er paso</p>  <p>Extienda las caderas de la niña y estire los pliegues de la piel en la ingle.</p> <p>Coloque la mitad inferior de la bolsa. Comience colocando la parte del medio en la pequeña área entre el ano y la vagina. Continúe avanzando hacia el exterior, presionando el parche adhesivo de manera que no se formen pliegues y aplicando firmeza para que quede en su lugar.</p>	<p>3er paso</p>  <p>Extienda las caderas de la niña y estire los pliegues de la piel en la ingle.</p> <p>Coloque la mitad inferior de la bolsa. Comience colocando la parte del medio en la pequeña área entre el ano y el escroto. Continúe avanzando hacia el exterior, presionando el parche adhesivo de manera que no se formen pliegues y aplicando firmeza para que quede en su lugar alrededor del escroto.</p> <p>Coloque el pene en la abertura de la bolsa de orina.</p>
<p>4º paso</p>  <p>Retire la mitad superior del parche adhesivo.</p> <p>Continúe avanzando hacia arriba y hacia afuera, presione el parche adhesivo de manera que no se formen pliegues y aplicando firmeza para que quede en su lugar.</p>	<p>4º paso</p>  <p>Retire la mitad superior del parche adhesivo.</p> <p>Continúe avanzando hacia arriba y hacia afuera, presione el parche adhesivo de manera que no se formen pliegues y aplicando firmeza para que quede en su lugar.</p>

- Coloque un pañal limpio. Asegúrese de que no jale la bolsa ni rompa el sellado.
- Revise la bolsa cada 20 minutos para ver si el bebé ha orinado.
- Cuando haya más de una cucharada de orina en la bolsa, despegue cuidadosamente la bolsa para evitar el derrame de orina.
- Corte la esquina de la bolsa y vierta la orina en el recipiente limpio para recolectar la orina.

- Cierre la tapa firmemente
- Complete la información solicitada en la etiqueta del recipiente
 - **La etiqueta debe incluir apellidos, nombre, fecha de nacimiento y fecha y hora de recolección.**

Smith, Jonathan
1/2/1959
8/1/2024 0700

La etiqueta del paciente debe ser completa y legible para que la muestra sea aceptada por el laboratorio. La etiqueta debe estar pegada al recipiente, NO a la tapa.

- Lleve la muestra al laboratorio dentro de las 2 horas posteriores a la recolección.
- Si esto no es posible, refrigere y llévela lo antes posible en un plazo de 24 horas.
- La orina refrigerada durante más de 24 horas no puede utilizarse para cultivo y será rechazada por el laboratorio.