

如何完成FIT



如何取得FIT套件？

您可以從醫生診所領取免疫法糞便潛血檢查 (Fecal Immunochemical Test, FIT) 套件。




什麼是FIT？

FIT是一種篩檢大腸癌的方法。這是一種自行操作的檢查方法，用於檢測糞便中肉眼無法觀察到的微量人類血液。您可以使用套件中提供的材料在家中進行此檢查。這些指示可幫助您收集少量糞便檢體，並將檢體放入保護容器中。接著，您將容器放入郵寄袋（信封）中，然後寄送至臨床實驗室進行處理。如果FIT結果異常（或「陽性」）您的糞便中可能有血，必須進行結腸鏡檢查以找出出血的來源。

- 您必須每年進行一次FIT套件以有效篩檢結腸癌。
- FIT結果異常（陽性）時，您就必須接受結腸鏡檢查。



步驟1. 請填寫取樣瓶上的資訊。

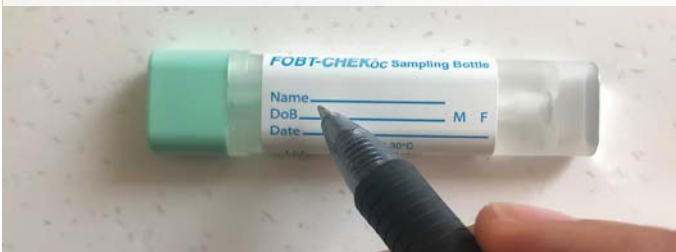

請在取樣瓶上寫下您的姓名、出生日期、目前日期和時間。

步驟2. 將收集紙放在馬桶水的上方。



步驟3. 將糞便檢體放置在收集紙上。



步驟4. 打開採樣瓶。



步驟5. 在糞便接觸水之前，使用探針刮擦糞便表面。



將檢體探針的凹槽部分完全覆蓋上糞便。

步驟6. 將載有糞便檢體的探針放回取樣瓶中，並蓋上瓶蓋。請勿重新打開。



收集紙是可生物降解的，可以沖入馬桶。

步驟7. 將取樣瓶包裝在小吸水墊，並將其放入生物危害袋中。



步驟8. 密封生物危害袋，然後將其放入回郵信封。



糞便樣本容易腐壞。請在48小時內儘快交回檢測套件。

重要 請在採集檢體後48小時內，將完成的檢測套件郵寄或親自送回您的診所。糞便樣本容易腐壞。

需要協助嗎？ 請聯絡您的主治醫師。